

Fototerapia UVB Banda Estrecha en el Hogar para Psoriasis, Vitiligo & Eczema

SolRx™ Serie 100

Tratamiento de pequeñas manchas
Tratamiento del cuero cabelludo



Lámparas Hacia Abajo



Lámparas Hacia Arriba

No se muestra el controlador

Modelo 120UVB-NB
2 Lámparas, 18 Vatios

PHILIPS
Banda Estrecha

El **SolRx Serie 100** es un pequeño equipo de **UVB Banda Estrecha** Para el tratamiento de psoriasis, vitiligo y eczema.

Tiene un área de tratamiento de 6.3 cm (80.6 centímetros cuadrados).

La barra se sostiene a mano o autónoma, y se completa con un sistema de Placas de Apertura™ para enfoque de puntos con precisión.


Los accesorios adicionales incluyen el cepillo Light Brush™ para tratamiento del cuero cabelludo y el Brazo de Posición™ para operación con



SolRx Serie 100 Pequeñas Manchas & Cuero Cabelludo



120UVB-NB
2 Lámparas—18 Vatios

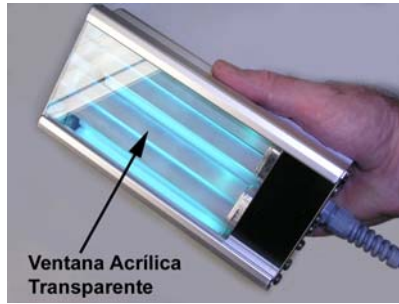


La ventana acrílica transparente permite que la barra se coloque directa en la piel



El cuerpo de aluminio ligero ayuda a mantener el equipo fresco.



Una de las muchas formas diferente de colocar la barra en una superficie.

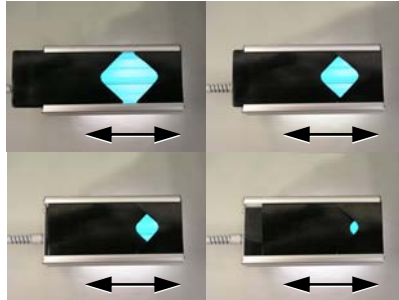

La característica Aperture Plate™ ajusta el área de tratamiento en segundos



El cepillo Light Brush™ opcional separa el cabello, la luz UV llega al cuero cabelludo



El temporizador digital e interruptor son importantes características de seguridad



El brazo de posición opcional permite el uso manos-libres (muestra en escritorio)



El equipo se puede operar desde su robusto estuche de transporte

Diferente a otros equipos de mano que usan una sola lámpara de 9-watios, el **SolRx Serie 100** se equipa con **dos lámparas de 9-watios** para tener doble potencia de entrada, doble área de tratamiento, y una forma del área de tratamiento más útil (más cuadrada).

La construcción de la barra en metal y la ventana acrílica transparente le permite ser colocada directamente sobre la piel para una salida UVB-Banda Estrecha significativamente mayor y tiempos de tratamientos más cortos que los equipos de la competencia. Es también más simple de usar.

Todos los equipos vienen completamente ensamblados con lámparas fluorescentes compactas nuevas, gafas protectoras de UV, juego de 6 Aperture Plates, estuche de transporte, y exhaustivo Manual del Usuario con guías de exposiciones detalladas para psoriasis y vitiligo.

El cepillo Light Brush™ y el Brazo de Posición™ son opcionales.

Dimensiones (centímetros): Estuche 11.4 x 30.4 x 40.6

Dos modelos UVB Banda Estrecha:
120UVB-NB: 2 lámparas, 18 vatios
110UVB-NB: 1 lámpara, 9 vatios,
También disponible en UVB-Banda Estrecha



Todos los modelos cumplen con la FDA de EEUU y Health Canada .

Las leyes Federales de EEUU restringen este equipo a venta por u orden de un médico.

Solarc Systems está certificado ISO-13485 para el diseño & fabricación de equipos médicos de fototerapia ultravioleta.



Envíenos su nombre, teléfono, ciudad y país. Un representante de Solarc se comunicará con usted en español lo antes posible.

Correo: ventas@SolArcSystems.com

SolArcSystems.com

