

Fototerapia UVB Banda Estrecha en el Hogar para Psoriasis, Vitiligo & Eczema

SolRx[™] Serie 500

Tratamiento de Manos & Pies
Tratamiento de Áreas




Horquilla de Montaje
Desmontable

Ajuste para tratamiento
de Áreas

Modelo 550UVB-NB
5 Lámparas, 180 Vatios

PHILIPS

UVB-Narrowband

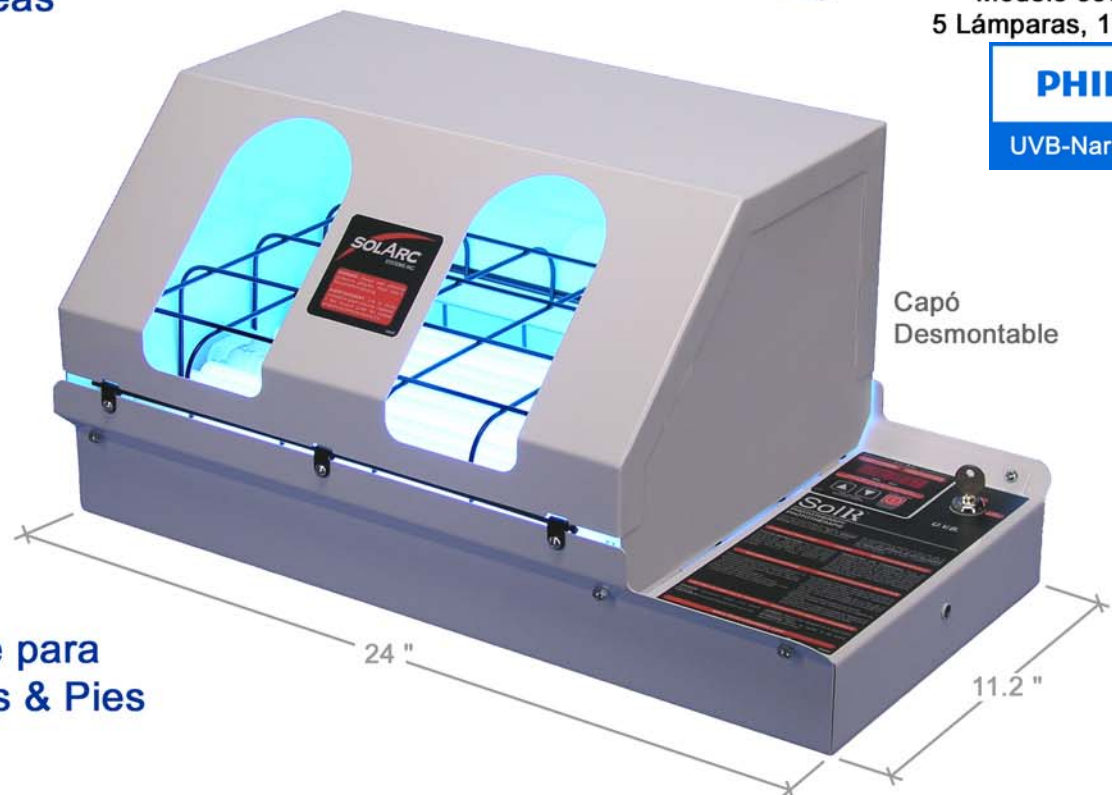

Capó
Desmontable

Ajuste para
Manos & Pies

El **SolRx Serie 500** es un equipo de **UVB-Banda Estrecha**

Mediano para el tratamiento de psoriasis, vitiligo & eczema.

Tiene una área de tratamiento de 46 cm x 33 cm (1.6 pies cuadrados).


Este versátil equipo puede articularse a casi cualquier posición para proporcionar tratamiento de manos, pies o cualquier otra área del cuerpo.

Las potentes lámparas fluorescentes compactas gemelas reducen los tiempos de tratamiento.

Ver al dorso y SolarcSystems.com para más información.




SolRx Serie 500 Tratamiento para Manos/Pies & Áreas

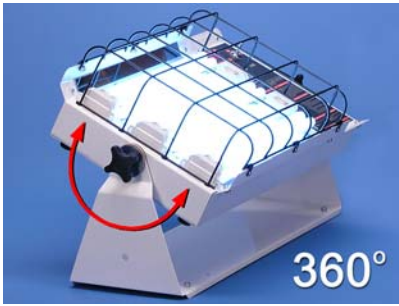

La horquilla permite al equipo girar 360° a casi cualquier posición.



En segundos lo gira a conveniencia. Distancia de tratamiento 13 a 23 cm.

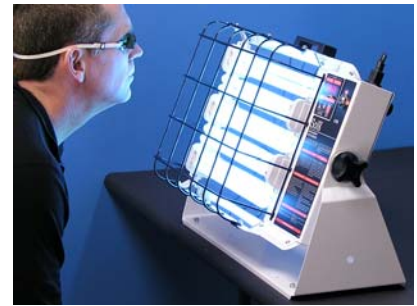

Perfecto para tratamiento de vitiligo en la cara con UVB Banda Estrecha



O póngalo en el piso para tratar psoriasis en las rodillas y piernas.



Para tratar los pies instale el capó y gírelo. No se necesita herramienta



O retire la horquilla y úselo para manos/pies, tal como en la clínica



Potentes lámparas gemelas UVB-NB reducen el tiempo de tratamiento



El temporizador digital e interruptor son importantes para la seguridad



550UVB-NB
22 lbs (10 kg)
Cárguelo por la asa y llévalo donde quiera!

Además de la inigualable versatilidad del **SolRx Serie 500**, está su impresionante salida de luz. Modernas lámparas fluorescentes compactas Philips 36-watt PL-L36W/01 proporcionan considerablemente mayor irradiancia UVB-Banda Estrecha y tiempos de tratamientos más cortos que los equipos de la competencia, que usan lámparas convencionales "T12" de 20 Vatios. Todas las configuraciones de arriba se pueden obtener sin usar ninguna herramienta. Todos los equipos vienen completamente ensamblados con lámparas nuevas, capó & horquilla desmontables, gafas protectoras de UV, y exhaustivo Manual del Usuario con guías de exposiciones detalladas para psoriasis y vitiligo. No hay nada más que usted tenga que comprar. También disponible en UVB-Banda Ancha, UVA & UVA1. Favor de visitar **SolarcSystems.com** más info.

Dimensiones (centímetros): 61 x 34.3 x 16.5 de altura (sin el capó ni la horquilla)
Peso: 15 a 25 libras (incluyendo capó & horquilla)

Cuatro modelos **UVB Banda Estrecha**:
520UVB-NB: 2 lámparas, 72 vatios
530UVB-NB: 3 lámparas, 108 vatios
550UVB-NB: 5 lámparas, 180 vatios
550UVB-NB-CR (para uso clínico)



Todos los modelos cumplen con la FDA de EEUU y Health Canada

Las leyes Federales de EEUU restringen este equipo a venta por u orden de un médico

Solarc Systems está certificado ISO-13485 para el diseño & fabricación de equipos médicos de fototerapia ultravioleta.



Envíenos su nombre, teléfono, ciudad y país. Un representante de Solarc se comunicará con usted en español lo antes posible.
Correo: ventas@SolarcSystems.com
SolarcSystems.com

